


(Ako obsluhovať)

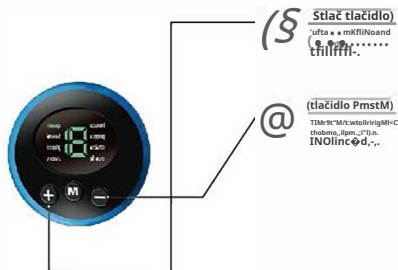

Keď stlačíte tlačidlá „zapnúť“ / „zvýšiť intenzitu“, kontrolka sa postupne rozjasní.

Keď stlačíte tlačidlá „vypnúť“ / „znižovať intenzitu“, kontrolka postupne stmavne.

- 1. Tlačidlá "Power On"/"Increase Intensity" poskytujú 19 úrovní intenzity.
- 2. Tlačidlo výberu režimu vám umožňuje vybrať si z 8 rôznych režimov.

(Ako používať diaľkový ovládač)



Poznámka: Odstráňte transzerovný film before použiť

(Metóda diaľkového ovládania)

1. Pred použitím odstráňte plastovú fóliu.
2. Pre prevádzku infračerveného diaľkového ovládača zarovnajte zadnú časť ovládača so štandardným diaľkovým ovládačom.
3. Po použití vráťte plastovú fóliu na pôvodné miesto.

OigIlot WWW.DIGI-LOT.COM

(Použite Kroky)



Automatické nastavenie telesných vnemov:

Pre optimálnu efektivitu cvičenia sa EMS zariadenie automaticky prispôbi reakcii vášho tela.

Časová efektivita: Relácia EMS zvyčajne trvá približne 15 minút od začiatku do konca.

Frekvencia používania: Pre efektívne výsledky sa odporúča používať rovnakú svalovú skupinu nie viac ako raz denne.

Optimalizácia životnosti batérie: Ak chcete predĺžiť životnosť batérie, zväzťe zníženie úrovne intenzity.

Úvahy o nízkych teplotách: Majte na pamäti, že výkon batérie sa môže znížiť pri nízkej teplote

Nasledujúce osoby by sa mali vyhnúť používaniu tohto produktu: Ktokoľvek s defibrilátorom (AICD), vybaveným kardiostimulátorom alebo automatickým implantovaným srdcovým zariadením.

Tehotné osoby.

Tí, ktorí majú diagnostikovanú hlbokú žilovú trombozú (DVT), aby sa zabránilo akémukoľvek narušeniu zrazeniny.

Jedinci s vysokým krvným tlakom. Tí, ktorí majú srdcové choroby.

Technické špecifikácie

Funkcia	EMS Foot Mar.Hgef
Režim Utिंग	8 režimov
Úroveň Intensity	19 úrovní
Napätie	0C3V
Výkon	Maximálne 9.15111A.
Navrhované 3Mgawatu.a ofu.Ing environment.	Okolo 15-35°C
Auto Shut-olr	2QMinutes
Fri-Quency	1,100 Hz
Typ&ofbanery	USB nabíjací kábel
	Rozmer 32 x 29 cm
ACC#ROrH	t*Main 0.Yice 1*Podložka na nohy 1*Vier Menu 1*USB.II (hargingC.b@)

EMS masážny prístroj na nohy

EMS

Spoločnosť Digilot LLC - LCD

Model s 8 režimami a 19 úrovňami



Odporúčame používať raz denne. Zariadenie sa automaticky vypne približne 20 sekúnd po tom, čo nie je pripojené k telu.


Dôležité pokyny na prečítanie pred použitím:

1. Zabezpečte, aby sa zaskakovací konektor podložky automaticky vypol do 10 sekúnd, ak sa dostane do kontaktu s vodičom (Poznámka: Bez vodiča by sa nemal zapínať).
2. Keď používate podložku a výrobok súčasne, uistite sa, že máte bosé nohy položené na výrobok tak, ako bolo zamýšľané, inak sa automaticky vypne do 10 sekúnd (Poznámka: Bez správneho umiestnenia by sa nemal zapínať).
3. Ovládač bude fungovať len po správnom zapnutí; v opačnom prípade sa automaticky vypne do 10 sekúnd (Poznámka: Bez správneho postupu by sa nemal zapnúť).
4. Počas používania výrobku sa uistite, že vaše nohy zostávajú v kontakte s podložkou na chodidlá; v opačnom prípade sa vypne do 10 sekúnd (Poznámka: Bez správneho umiestnenia nohy by sa nemal zapnúť). Produkt funguje v etapách, pričom každá etapa trvá približne 20 minút.
5. Počas nabíjania bude svietiť červené svetlo produktu a po úplnom nabití sa vypne (Vo všeobecnosti by počas nabíjania nemalo byť žiadne napájanie). Plné nabitie zvyčajne trvá približne 30 minút.
6. Výrobok nepoužívajte, ak máte na sebe elektricky vodivé ponožky alebo čisté bavlnené ponožky, pretože to môže viesť k automatickému vypnutiu do 10 sekúnd.
7. Koberce by sa nemali umývať.
8. Hostiteľ by sa nemal používať počas nabíjania.

WWW.DIGI-LOT.COM **OigIlot**

Hlavné zariadenie (PREDNÉ)

Hlavné zariadenie (ZADNÉ)

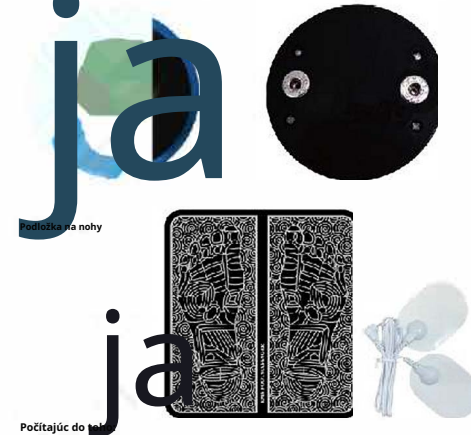

- 1• Hlavné zariadenie
- 1• Používateľská príručka
- 1• Diaľkové ovládanie
- 1• Podložka na nohy
- 1• USB nabíjací kábel
- 4• TENS Patch
- 1• káblové vedenie TENS

jamportantNotfľad:

POUŽÍVAJTE LEN PODĽA NÁVODU. TOTO NIE JE ZDRAVOTNÍCKY PRÍSTROJ.

Tu uvedené informácie slúžia len na informačné účely a nie sú určené ako náhrada za rady od vášho lekára alebo poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Vlastnosti produktu:

Nízkofrekvenčné ošetrovanie funguje s rytmickým a jemným impulzom.

Nízkofrekvenčná elektrická stimulácia sa riadi pravidelným rytmom, ktorý poskytuje intervaly aj pauzy. Úpravou nastavení výkonu a rýchlosti dodáva telu rytmický a jemný impulz. Mäkkosť tejto nízkofrekvenčnej stimulácie napodobňuje účinky masáže, vrátane pocitov ako tlak, štipanie a perkusné poklepávanie, podobné tým, ktoré vykonávajú ľudské ruky.

Výber režimu: 1. Vyberte si z 8 dostupných režimov.

2. Vyberte si zo 6 režimov s jednoduchým a priamočiarým ovládaním.

Funkcia automatického vypnutia: Ak ho zabudnete vypnúť, zariadenie sa po 20 minútach automaticky vypne. **Úroveň intenzity stimulácie:** Intenzitu stimulácie je možné nastaviť v 19 úrovňach v rozsahu od 1 do 19.



Pre jemnejší zážitok začnite nastavením intenzity na nižšiu úroveň pri prvom použití. Podrobný návod na 6 dostupných režimov nájdete v príručke. Ďalšie informácie nájdete v dodanom návode na masáž.